

毎日楽しくリハビリテーションができる、生きた話し言葉の練習システム。

失語症リハビリテーション支援システム 花鼓Ⅲ



使用例

あらゆる失語症症例に対応できる練習システム。

ブローカ失語、ウェルニッケ失語、失名詞失語、伝導失語、超皮質性失語など、あらゆるタイプの失語症のリハビリテーションに対応できます。

話し言葉のリズムやイントネーションを重視。

日本語の典型的な音、意味、規則の土台である話し言葉のリズムやイントネーションの練習を充実させています。

簡単操作。


大きな5つのボタンの専用キーボードにより、簡単に操作できます。

練習をマイペースで。

準備体操から始まり4段階のステップをご用意。自分のペースで無理なく練習ができ、上達具合も記録できます。

五感を効果的に活用。

パソコンで動作する「周波数調整器と振動子」を国内で初めて提供しました。直接五感に訴える効果的な学習を行うことができます。

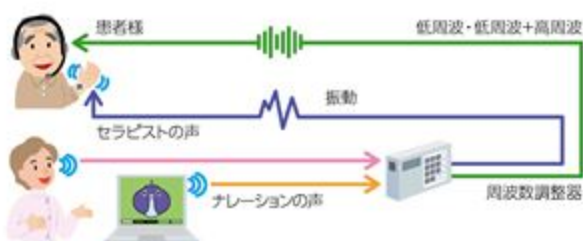

音を聞き取りやすくする周波数調整器と振動を身体に伝える振動子。



一覧画面



専用キーボード

Step 0	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
【全11面】	【全40面】	【全72面】	【全115面】	【全118面】
練習前の準備体操 口と身体の緊張感を和らげるために、アニメーションの動作に合わせて、口や舌、顎の動きを楽しみながらなめらかにしていきます。	単音の発音の練習 形や動きの速さ、方向、位置（高さ）、道筋、色彩で、音の特徴を把握します。画面のイメージを身体で再現しながら発音する練習です。	音の表現の練習 STEP1の音を使って、感情、呼びかけ、応答表現などを練習し、音の長さ、間隔など日本語特有のリズムやイントネーションを身につけます。	話し言葉の練習 日常よく使われる3つから4つの文でまとめられた掛け声、挨拶などの、伸ばし方、切り方、響かせ方など、話し言葉の特徴を練習します。	話し言葉を唱える練習 STEP3までの各練習場面での話し言葉のまとまりが理解でき、日常会話に近いスピードで繰り返せるようになるまで総合して練習します。
 準備体操 顎の開閉運動	 「か」の練習 「あ」の練習	 「か」の練習 かつ かつ かつ まっ かつ かつ	 「か」の練習 かえ ろー かえ ろー ね もーかえろーね	 「か」の練習 かったよ、 かったよ また かったよ



失語症リハビリテーション支援システム 花鼓Ⅲ 送料サ

ANIMO-Ⅲ ¥328,000

【動作環境】

OS	Windows 7/8/10(いずれも64ビット版)
CPU	Intel Core i3以上推奨または同等性能の互換CPU
メモリ	4GB以上推奨
HDD空き容量	20GB以上推奨
サウンド機能	16ビットの音声再生/録音に対応したもの。マイク入力とヘッドホン出力の差込口が必要。
その他	インストール時にCD-ROMドライブが必要。周波数調整器ANM-G2000、専用入力キーボードをご利用の場合、PC本体とUSB接続が必要。

【構成】花鼓Ⅲ(ソフトウェア) 教材CD-ROM 2枚、周波数調整器ANM-G2000、振動子、専用入力キーボード、マイク付ヘッドフォン、オーディオコード2本、花鼓使用手順書

評価測定

運動療法

水治療法

物理療法

救急

ADL・作業療法

言語療法

自立支援機器

衛生・防災

入浴装置

言語療法